



**KERN & Sohn GmbH**

Ziegelei 1  
D-72336 Balingen  
E-Mail: [info@kern-sohn.com](mailto:info@kern-sohn.com)

Tel: +49-[0]7433- 9933-0  
Fax: +49-[0]7433-9933-149  
Internet: [www.kern-sohn.com](http://www.kern-sohn.com)

# Applikationshandbuch Feuchtebestimmer

Version 1.1  
06/2013  
D

Application Notes-ZB-d-1311

## Inhaltsverzeichnis

1	Allgemeines .....	3
<b>1.1</b>	<b>Trocknungsmethoden.....</b>	<b>4</b>
1.1.1	Trockenschrankmethode.....	5
1.1.2	Karl- Fischer-Methode .....	6
1.1.3	Thermogravimetrische Messung mit Halogen-Feuchtebestimmer.....	7
1.1.3.1	Wellenspektrum .....	7
2	Betrieb Halogen-Feuchtebestimmer .....	8
<b>2.1</b>	<b>Probengröße .....</b>	<b>8</b>
<b>2.2</b>	<b>Probenvorbereitung .....</b>	<b>8</b>
<b>2.3</b>	<b>Messparameter definieren .....</b>	<b>9</b>
2.3.1	Trocknungsmodi.....	10
2.3.2	Abschaltkriterium .....	11
2.3.3	Ergebnisanzeige .....	12
<b>2.4</b>	<b>Datenübertragung an einen Drucker oder PC .....</b>	<b>13</b>
3	Beispielmessungen mit Halogen-Feuchtebestimmer.....	14
<b>3.1</b>	<b>Nahrungsmittel .....</b>	<b>14</b>
3.1.1	Speisesalz (NaCl) .....	14
3.1.2	Milch .....	15
3.1.3	Kristallzucker .....	16
3.1.4	Mayonnaise .....	17
3.1.5	Löslicher Kaffee.....	18
3.1.6	Kaffeebohnen .....	19
3.1.7	Grüner Tee .....	20
3.1.8	Gersteflocken .....	21
3.1.9	Reis.....	22
3.1.10	Tomaten Ketchup .....	23
3.1.11	Zitroneneis .....	24
3.1.12	Getrockneter Mango .....	25
3.1.13	Maisstärke .....	26
3.1.14	Palmöl.....	27
<b>3.2</b>	<b>Industrieprodukte, Kunststoffe, Schlamm usw.....</b>	<b>28</b>
3.2.1	Natriumtartrat-Dihydrat .....	28
3.2.2	Plastikgranulat .....	29
3.2.3	Waschpulver.....	30
3.2.4	Farbe auf Wasserbasis .....	31
3.2.5	Schlammkuchen.....	32
3.2.6	Blumenerde .....	33
3.2.7	Sägemehl.....	34
3.2.8	Toner .....	35
3.2.9	Lippenstift .....	36
3.2.10	Handseife.....	37
4	Anhang.....	38
<b>4.1</b>	<b>Applikationstabelle.....</b>	<b>38</b>

## 1 Allgemeines

Die Feuchte einer Probe ist nicht nur der Gehalt an Wasser im Material. Unter „Materialfeuchte“ werden alle flüchtigen Stoffe verstanden, die bei der Erwärmung entweichen und zu einem Gewichtsverlust einer Probe führen. Hierzu zählen:

- ⇒ Wasser
- ⇒ Fette
- ⇒ Öle
- ⇒ Alkohole
- ⇒ Organische Lösungsmittel
- ⇒ Aromastoffe
- ⇒ Flüchtige Bestandteile
- ⇒ Evt. Zersetzungsstoffe (bei zu starker Erwärmung)

Es gibt viele Methoden, den Feuchtegehalt einer Probe zu bestimmen. Die Methoden lassen sich in zwei Kategorien einteilen:

Mit den absoluten Verfahren wird der Feuchtegehalt einer Probe direkt bestimmt (z. B. Gewichtsverlust durch Trocknung). Zu diesen Verfahren zählen die Trocknung im Trockenschrank, die Infrarottrocknung und die Mikrowellentrocknung. Alle drei Verfahren arbeiten thermogravimetrisch.

Mit den abgeleiteten Verfahren findet eine indirekte Bestimmung statt. Es wird eine physikalische Eigenschaft gemessen, die mit der Feuchte in Zusammenhang steht (z.B. Absorption elektromagnetischer Strahlung). Zu diesen Verfahren zählen die Karl-Fischer-Titration, die Infrarotspektroskopie, die Mikrowellenspektroskopie usw.

## 1.1 Trocknungsmethoden

Halogen-Feuchtebestimmer

Trockenschrankmethode

Mikrowellentrockner

Karl-Fischer-Methode

Warum ermitteln unterschiedliche Methoden unterschiedliche Materialfeuchten?

- ⇒ Der Trockenschrank verdampft neben dem Wasser auch leicht flüchtige Bestandteile. Durch die schwache Erwärmung mittels Konvektionstrocknung wird die Probe oft nicht vollständig getrocknet. Der Messwert liegt oberhalb des Wassergehalts, aber unterhalb des Gesamtfeuchtegehalts.
- ⇒ Der Infrarot- oder Halogentrockner verdampft neben dem Wasser auch leicht und schwer flüchtige Bestandteile. Durch die intensive Erwärmung mittels Absorptionstrocknung wird die Gesamtfeuchte der Probe ermittelt. Der Messwert liegt meist oberhalb des Referenzverfahrens Trockenschrank. (Probleme: z.B. Porenverschluss, Oberflächenverbrennungen)
- ⇒ Ein Mikrowellentrockner verdampft neben dem Wasser nur geringe Mengen leicht flüchtiger Bestandteile. Durch die - auf Dipole ausgerichtete - Absorptionstrocknung liegt der Messwert sehr dicht am Wassergehalt und damit unterhalb vom Trockenschrankwert.
- ⇒ Die Karl-Fischer-Titration ermittelt durch eine chemische Reaktion die Anzahl der Wassermoleküle. Der Messwert entspricht hochgenau dem Wassergehalt.

International sind zwei Referenzmethoden anerkannt:

- ⇒ Die Trockenschrank – Methode zur Bestimmung der Materialfeuchte
- ⇒ Die Karl-Fischer-Titration zur Bestimmung des Wassergehalts
- ⇒ Alle anderen Methoden müssen – nach Bedarf – auf eines dieser beiden Verfahren abgeglichen werden!

### 1.1.1 Trockenschrankmethode

Bei der traditionellen Trockenschrankmethode erwärmt ein heißer Luftstrom die Probe von außen nach innen, gegen den Strom der aufsteigenden Feuchtigkeit und der an der Oberfläche entstehenden Verdunstungskälte. Oft sind lange Trocknungszeiten erforderlich.

Ein Trockenschrank ist eine Vorrichtung zur Entfeuchtung eines Gegenstandes, meist über die Entfeuchtung der Luft, unter Einsatz von hygroskopischen Materialien (Sorbentien). Trockenschränke werden für Temperaturbereiche von Raumtemperatur bis etwa 250°C angeboten.

Vorgehen (ca.):

- Probeschale wiegen
- Probe einwiegen
- Probe 1 Stunde trocknen
- Probe 20 Min. im Exsikkator (s.u.) abkühlen
- Probe zurückwiegen
- Manuelle Ergebnisberechnung
  
- Probe 30 Min. nachtrocknen
- Probe 20 Min. im Exsikkator abkühlen
- Probe zurückwiegen
- Erneute Ergebnisberechnung
- Schritte wiederholen, bis die Probe gewichtskonstant ist

#### Was ist ein Exsikkator?

Ein Exsikkator (auch: Exsiccator, von lat. exsiccare: austrocknen) ist ein chemisches Laborgerät, das hauptsächlich zur Trocknung fester chemischer Stoffe in der präparativen Chemie Verwendung findet.

Bei einem Exsikkator handelt es sich um ein meist aus Glas (oder seltener Kunststoff) gefertigtes dickwandiges Gefäß, welches durch einen mit Planschliff versehenen Deckel luftdicht verschlossen wird. Um diesen Verschluss zu gewährleisten, wird der Schliff gewöhnlich mit einem Schliff Fett belegt. Der untere Teil des Exsikkators wird mit einem Trocknungsmittel befüllt und auf einem Einsatz aus Kunststoff oder Keramik oberhalb des Trocknungsmittels wird die zu trocknende Substanz abgelegt. Das Trocknungsmittel entzieht der Luft im Inneren des Exsikkators das von der zu trocknenden Substanz abgegebene, verdunstete Lösungsmittel. Dadurch kann die Substanz weiteres adsorbiertes Lösungsmittel verlieren; dieser Vorgang hält bis zum Erreichen eines bestimmten Restgehaltes an Lösungsmittel an, der durch die Intensität des Trocknungsmediums und die adsorptiven Eigenschaften der Substanz bedingt, nicht weiter vermindert werden kann oder das Trocknungsmittel (seine Kapazität) erschöpft ist. Soll dabei Wasser entzogen werden, so wird die vorrangige Eigenschaft des Trocknungsmittels als Hygroskopie bezeichnet. Gängig verwendet werden dabei Calciumchlorid, Phosphorpentoxid, Schwefelsäure oder Kieselgel; letzterem kann ein Feuchtigkeitsindikator beigelegt sein (Blaugel). Außer Wasser können in Abhängigkeit von der Wahl des Trocknungsmittels auch Reste anderer Lösungsmittel aufgenommen werden.

### 1.1.2 Karl- Fischer-Methode

Diese Methode dient zur Mengenbestimmung des Wassergehalts. Hierbei wird die spezifische Reaktion des Wassers auf ein Karl Fischer Reagens benützt, das Jod, Schwefeldioxid und Pyridin in Anwesenheit von Methanol enthält. Diese Methode kann entweder als coulometrische Titration oder volumetrische Titration angewendet werden. Bei der coulometrischen Titration wird die Probe dem Karl Fischer Reagens zugegeben und einer elektrolytischen Oxidation unterzogen, um Jod zu erzeugen. Da das Jod im Verhältnis zu der Menge Elektrizität nach dem Faradayschen Gesetz erzeugt wird, kann die Menge des Wassers sofort nach der Menge der Elektrizität bestimmt werden, die für die elektrolytische Oxidation benötigt wird. Bei der volumetrischen Titration wird die Probe einem geeigneten dehydratisierten Lösungsmittel in einem Titrationskolben zugegeben, der mit einem Titrant wasserfrei gemacht wurde. Die Titration erfolgt dann unter Verwendung eines Titrants mit zuvor standardisierten Titer (mg H<sub>2</sub>O/ml). Der Feuchtigkeitsgehalt der Probe wird aus dem Titrationsvolumen (ml) bestimmt. Automatische volumetrische Titratoren auf der Grundlage dieser Methoden sind im Handel erhältlich.

### 1.1.3 Thermogravimetrische Messung mit Halogen-Feuchtebestimmer

Die Halogen-Feuchtebestimmer von KERN liefern schnelle und zuverlässige Messergebnisse. Die Instrumente messen nach dem Prinzip der Thermogravimetrie. Die Probe wird gewogen und mit einer Halogenlampe (Infrarotstrahlung) erwärmt. Der Gewichtsverlust wird kontinuierlich erfasst und die Trocknung nach einem definierten Kriterium beendet. Aus der Gewichts Differenz wird der Feuchtegehalt automatisch errechnet.

Die Trocknung mit dem Halogenstrahler ist eine Weiterentwicklung der Infrarottrocknungsmethode.

Während des Trocknungsprozesses in einem Halogen-Feuchtebestimmer absorbiert die Probe die Infrarotstrahlung einer Halogenlampe. Die Strahlung dringt zum überwiegenden Teil in die Probe ein und wandelt sich erst dort in Wärmeenergie um. Dadurch erhitzt sich die Probe sehr schnell.

Ein kleiner Teil der Strahlung wird von der Probe reflektiert oder durchgelassen. Die Menge der reflektierten Strahlung hängt überwiegend davon ab, ob es eine helle oder dunkle Probe ist

Diesen Effekt kennen Sie aus dem Alltag:


Wenn Sie mit schwarzer Kleidung in der Sonne stehen, ist es Ihnen viel heißer als mit einem weißen Hemd.

Für eine dunklere Substanz ist grundsätzlich eine leicht niedrigere Trocknungstemperatur zu wählen als für eine helle Probe.

Die Eindringtiefe der IR-Strahlung hängt von der Durchlässigkeit der Probe ab. Bei einer geringen Durchlässigkeit dringt die IR-Strahlung nur in die oberen Schichten ein. Entscheidend für den weiteren Transport der Wärme in die tiefer gelegenen Schichten ist damit das Wärmeleitvermögen der Substanz. Je höher die Wärmeleitfähigkeit ist, umso schneller und homogener erwärmt sich die Probe.

Aus diesem Grund muss die Substanz gleichmäßig und dünn auf der Probenschale verteilt sein, s. Kap. 2.1.1.

#### 1.1.3.1 Wellenspektrum

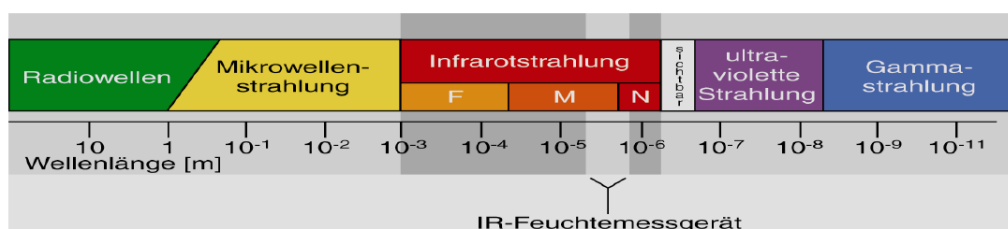

Die Infrarotstrahlung ist ein Teilbereich im elektromagnetischen Wellenspektrum. Diese nicht sichtbare Wärmestrahlung tritt an der langwelligen Seite des optischen Spektrums auf, also im Anschluss an das rote Licht. Infrarotstrahlung unterliegt den Gesetzen der Optik und kann z.B. mittels eines Hohlspiegels gebündelt werden.

## 2 Betrieb Halogen-Feuchtebestimmer

Die Qualität der Messresultate steht und fällt mit der optimalen Vorbereitung der Probe und mit einer korrekten Wahl der wichtigsten Messparameter wie

- ⇒ Probengröße
- ⇒ Trocknungstemperatur
- ⇒ Abschaltkriterium
- ⇒ Trocknungsdauer

Die optimale Trocknungstemperatur und Trocknungsdauer sind abhängig von der Art und Größe der Probe und von der gewünschten Genauigkeit des Messresultates. Sie lassen sich nur experimentell ermitteln.

### 2.1 Probengröße

Grundsätzlich gilt: Je inhomogener die Probe, um so größer die Probenmenge, die nötig ist, um ein wiederholbares Resultat zu erzielen.

Eine praktische Probenmenge liegt erfahrungsgemäß bei ca. 5 bis 15 g (2 bis 5 mm Höhe). Andernfalls kann es zu unvollständiger Trocknung kommen, verlängerter Messzeit, Verkrustungen, Verbrennungen und nicht reproduzierbaren Messergebnissen.

### 2.2 Probenvorbereitung

Immer nur eine Probe für die Messung vorbereiten. Dadurch wird vermieden, dass die Probe Feuchtigkeit mit der Umgebung austauschen kann. Müssen mehrere Proben gleichzeitig entnommen werden, so sollten diese, in luftdichte Behälter verpackt werden, damit sie sich während der Lagerung nicht ändern.

Die Probe gleichmäßig und dünn auf der Probenschale verteilen, um reproduzierbare Ergebnisse zu erhalten.

Durch ungleichmäßiges Aufbringen kommt es zu einer inhomogenen Wärmeverteilung in der zu trocknenden Probe, was unvollständige Trocknung oder die Verlängerung der Messzeit zur Folge hat. Durch eine Aufhäufung der Probe erfolgt eine stärkere Erwärmung an den oberen Schichten, was Verbrennungen oder Verkrustungen zur Folge hat. Die hohe Schichtdicke oder eventuell entstehende Verkrustung macht es der Feuchtigkeit unmöglich aus der Probe zu entweichen. Diese Restfeuchte hat zur Folge, dass so ermittelte Messergebnisse nicht nachvollziehbar und reproduzierbar sind.

Für flüssige, pastöse, fetthaltige, schmelzende und stark reflektierende Proben sollten die optional erhältlichen Glasfaserfilter verwendet werden. Dies gilt auch für Proben, die unter Wärmeeinwirkung eine Haut an der Oberfläche bilden. Der Glasfaserfilter sorgt für eine gleichmäßige und rasche Wärmeverteilung und verhindert die Bildung einer undurchlässigen Haut an der Probenoberfläche.

### Probenvorbereitung für Feststoffe:



- Pulvrige und körnige Proben gleichmäßig auf der Probenschale verteilen
- Grobkörnige Proben mit Mörser oder Schroter verkleinern. Beim Zerkleinern der Probe jegliche Wärmezufuhr vermeiden, da dies zu Feuchteverlust führt.

### Probenvorbereitung mit hohem Feuchtegehalt:

Zum Messen von Ketchup, Mayonnaise, oder Zahnpasta drücken Sie die erforderliche Probenmenge auf die Probenschale und verstreichen diese mit einem Spachtel. Arbeiten Sie schnell, da die Verdampfung schon beim Verstreichen der Probe beginnen kann, wenn diese einen hohen Gehalt an leicht flüchtigen Bestandteilen hat.

### Probenvorbereitung für Flüssigkeiten:



Gießen Sie die Flüssigkeit in die Schale, um sie über die ganze Fläche zu verteilen. Eine sehr dickflüssige Probe verteilt sich jedoch nicht ganz leicht. Verteilen Sie in diesem Fall die Probe gleichmäßig mit einem Spachtel in der Schale.

Für Flüssigkeiten, Pasten oder schmelzende Proben empfiehlt es sich einen Glasfaserfilter zu verwenden. Der Glasfaserfilter hat folgende Vorteile:

- gleichmäßige Verteilung wegen Kapillarwirkung
- keine Tropfenbildung
- schnelles Verdunsten durch größere Oberfläche

## 2.3 Messparameter definieren

Zur Anpassung des Feuchtebestimmers an die zu messende Probe stehen folgende Messparameter zu Verfügung:

- ⇒ Trocknungsmodus
- ⇒ Abschaltkriterium
- ⇒ Ergebnisanzeige

### 2.3.1 Trocknungsmodi

Die wählbaren Trocknungsmodi sind von Gerät zu Gerät verschieden. Detaillierte Informationen sind der Betriebsanleitung die dem jeweiligen Gerät beiliegt zu entnehmen.

In der Regel können sie unter den nachfolgend beschriebenen Modi die Einstellungen für die Temperatursteuerung entsprechend den Eigenschaften der Probe auswählen.

#### Einstellungsbeispiele:



##### **Standardtrocknung**

Die Standardtrocknung ist für die meisten Probenarten geeignet.

##### **1. Automatischer Ende-Modus: AUTO**

Die Probe wird auf die eingestellte Temperatur bei normaler Leistung erwärmt und wird dann auf dieser Temperatur gehalten. Die Probenmasse nimmt dann mit der Zeit ab. Die Messung wird automatisch beendet, wenn der eingestellte Gewichtsverlust ( $\Delta M$ ) erreicht wird.

Durch die Einstellung der automatischen Abschaltbedingung auf einen kleinen Wert, erhält man einen gemessenen Feuchtigkeitsgehaltswert, der dem tatsächlichen Wert näher kommt, jedoch wird dadurch die Messzeit verlängert. Mit Einstellung eines höheren Werts kann die Messung schnell beendet werden, in manchen Fällen aber können die Messungen abbrechen, bevor das Wasser ausreichend verdampft ist. Die automatische Abschaltbedingung muss so eingestellt werden, dass diese den Eigenschaften der Probe entspricht.

##### **2. Zeitgesteuertes Ende: TIME**

Die Probe wird auf die eingestellte Temperatur bei normaler Leistung erwärmt und wird dann auf dieser Temperatur gehalten. Die Messung wird beendet, wenn die eingestellte Zeit abgelaufen ist.

Diese Methode eignet sich für Proben bei denen ein geringer Masseverlust unbestimmt andauern kann.



##### **Schnelltrocknung**

Die Schnelltrocknung ist für Proben mit einem Feuchtigkeitsgehalt von ca. 5% - 15% (z.B. Flüssigkeiten) und wärmebeständigen Proben mit hohen Zersetzungstemperaturen einsetzbar.

Natriumtartrat-Dihydrat und feines Mehl sind Beispiele für solche Messungen

Bei der Schnelltrocknung wird eine Vorheizstufe zugeschaltet. d. h. die Temperatur wird sehr schnell erhöht und übersteigt solange die eingestellte Trocknungstemperatur bis der eingestellte Sollwert (z.B. Gewichtsverlust/30 sec) unterschritten wird.

Anschließend wird die Temperatur auf den eingestellten Wert herunter geregelt. Die Trocknung endet abhängig von der Einstellung, wenn die eingestellte Zeit abgelaufen ist oder der eingestellte Gewichtsverlust ( $\Delta M$ ) erreicht ist.



### Schonrocknung

Die Schonrocknung ist für Substanzen geeignet, welche eine schnelle Erwärmung durch die Strahler nicht vertragen. Es gibt auch Substanzen, welche bei schneller Erwärmung eine Haut bilden. Diese Haut beeinflusst anschließend das Verdampfen der eingeschlossenen Feuchtigkeit. Für diese Substanzen ist diese softe Art der Erwärmung ebenfalls geeignet.

Bei der Schonrocknung wird die Temperatur langsamer als bei der Standardrocknung auf den eingestellten Wert erhöht.

Die Messung endet abhängig von der Einstellung, wenn die eingestellte Zeit abgelaufen ist oder der eingestellte Gewichtsverlust ( $\Delta M$ ) erreicht ist.

Die Schonrocknung ist für Proben geeignet, welche eine schnelle Erwärmung durch die Strahler nicht vertragen. Ebenso für Proben, welche bei schneller Erwärmung eine Haut bilden. Diese Haut beeinflusst anschließend das Verdampfen der eingeschlossenen Feuchtigkeit.



### Stufentrocknung

Die Stufentrocknung eignet sich für das Messen eines jeden Bestandteils, wenn die Verdampfungstemperatur von Wasser und den flüchtigen Bestandteilen, die in der Probe enthalten sind, unterschiedlich sind.

Bei steigender Probentemperatur verdampft das Wasser und die Änderung des Feuchtigkeitsgehalts wird normalerweise ständig geringer. In einigen Fällen nimmt der Feuchtigkeitsgehalt jedoch über einer gewissen Temperatur wieder zu. Vermutlich weil das Wasser anfänglich verdampft, danach aber beginnen die schwer flüchtigen Substanzen zu verdampfen oder die Probe beginnt zu zerfallen. Solche Messungen sind nicht zuverlässig da eine genaue Messung des Feuchtigkeitsgehalts unmöglich ist. Dieses Phänomen erscheint zum Beispiel, wenn Sojabohnen gemessen werden. In diesem Fall kann die Stufentrocknung nützlich sein, um das Wasser bei niedriger Temperatur verdampfen zu lassen, bevor die Temperatur erhöht wird, um den Feuchtigkeitsgehalt der Bestandteile mit hohem Siedepunkt zu bestimmen. Es ist jedoch schwierig, Bestandteile zu trennen, die einen Siedepunkt nahe dem von Wasser, oder die ähnlich hohe Siedepunkte haben.

Die einzelnen Stufen können in Dauer und Erwärmungsschritt frei gewählt werden.

Die Messung endet abhängig von der Einstellung bei Stufe 2 oder 3, wenn die eingestellte Zeit abgelaufen oder der eingestellte Gewichtsverlust ( $\Delta M$ ) erreicht ist.

### 2.3.2 Abschaltkriterium

Das Abschaltkriterium bestimmt, wann die Messung beendet und das Resultat angezeigt wird. Die Feuchtebestimmer bieten in der Regel zwei verschiedene Abschaltkriterien an.

Die zeitgesteuerte Abschaltung (TIME) oder die Gewichtsabnahme pro Zeiteinheit (AUTO). Die integrierte Waage bestimmt kontinuierlich den Gewichtsverlust der Probe während der Trocknung. Wenn der Gewichtsverlust ( $\Delta M$ ) in einer gewissen Zeit ( $\Delta t$ ) unterschritten ist, wird die Trocknung beendet und das Resultat angezeigt


### 2.3.3 Ergebnisanzeige

Es stehen verschiedene Arten der Ergebnisanzeige zur Verfügung.

#### g: Restgewicht in Gramm

Angezeigt wird das Gewicht der Probe in Gramm.


#### % M: Feuchtegehalt

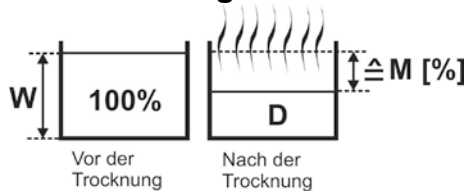

Angezeigt wird der Feuchtegehalt der Probe in Prozenten des Nassgewichtes  
(W = wet weight = Startgewicht = 100%)

$$M [0\dots-100\%] \quad \frac{\text{Nassgewicht } W - \text{Trockengewicht } D}{\text{Nassgewicht } W} \times 100\%$$


#### % D: Trockengehalt

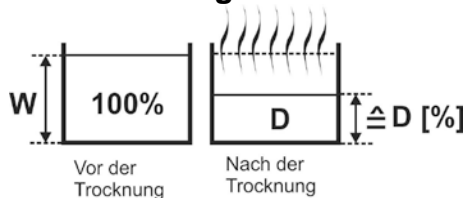

Angezeigt wird der Trockengehalt der Probe in Prozenten des Nassgewichtes  
(W = wet weight = Startgewicht = 100%)

$$D [100\dots0\%] \quad \frac{\text{Trockengewicht } D}{\text{Nassgewicht } W} \times 100\%$$

#### ATRO %M: ATRO Feuchtegehalt

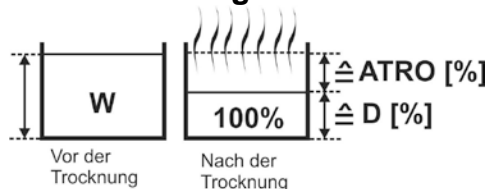

Angezeigt wird der Feuchtegehalt der Probe in Prozenten des Trockengewichtes  
(D = dry weight = Endgewicht = 100%)

$$ATRO [0\dots-999\%] \quad \frac{\text{Nassgewicht } W - \text{Trockengewicht } D}{\text{Trockengewicht } D} \times 100\%$$




ATRO ist eine Einheit, die ausschließlich in der Holzindustrie Anwendung findet.

## 2.4 Datenübertragung an einen Drucker oder PC

Für die Kommunikation zwischen Feuchtebestimmer und Drucker müssen folgende Bedingungen erfüllt sein:

- Feuchtebestimmer von der Stromversorgung trennen und mit einem geeigneten Kabel mit der Schnittstelle des Druckers verbinden. Der fehlerfreie Betrieb ist nur mit dem entsprechenden KERN- Schnittstellenkabel sichergestellt.
- Kommunikationsparameter (Baudrate, Bits und Parität) von Feuchtebestimmer und Drucker müssen übereinstimmen.

Zur Übernahme der Daten in ein PC-Programm empfehlen wir unsere Übertragungssoftware „Balance Connection KERN SCD 4.0“. Eine Software wie z. B. Excel kann zum Zeichnen von graphischen Darstellungen verwendet werden.

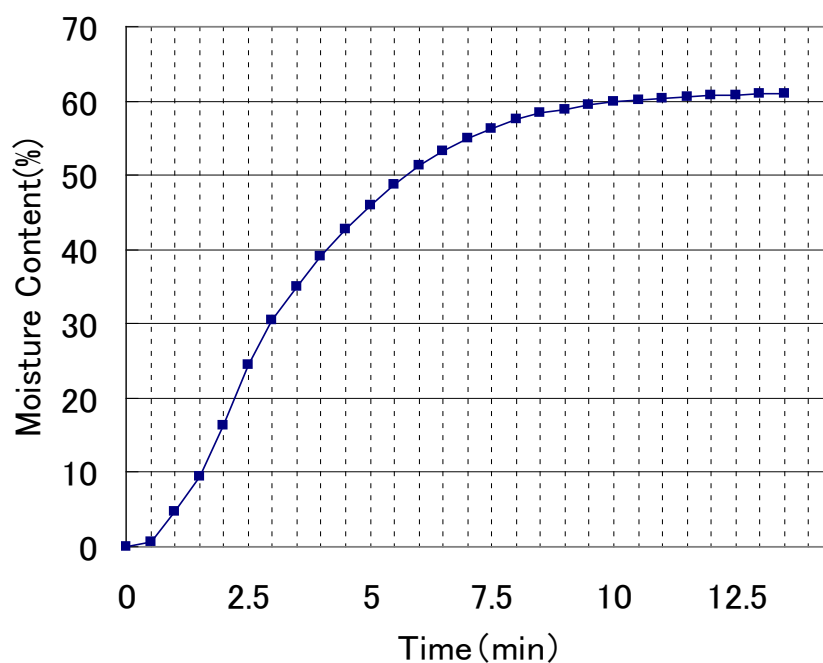

### 3 Beispielmessungen mit Halogen-Feuchtebestimmer

#### 3.1 Nahrungsmittel

##### 3.1.1 Speisesalz (NaCl)

Einstellungen: Standardtrocknung 200°C/ TIME 10 min

	Probengewicht (g)	Feuchtigkeit (%)
1.	5.032 g	0.08
2.	5.021 g	0.09
3.	5.052 g	0.08
MW		0.083

Probe vor der Messung



Gleichmäßig auf der Schale verteilt

Probe nach der Messung



Fast keine Änderung



Da dieses Salz unter Verwendung eines Ionenaustauschharzes gewonnen wurde, enthielt es fast keinen Verunreinigungen. Die Verpackung wurde erst kurz vor der Messung geöffnet, dadurch hatte das Salz keine Feuchtigkeit absorbiert. Der Feuchtigkeitsgehalt war extrem niedrig.

### 3.1.2 Milch



Für Flüssigkeiten empfiehlt es sich einen Glasfaserfilter (Option) zu verwenden. Dadurch wird die Trocknungszeit reduziert und die Reproduzierbarkeit erhöht.

- Einstellungen: Standardtrocknung 140°C/ TIME 10 min

	Probengewicht (g)	Feuchtigkeit (%)
1.	1.081 g	87.70
2.	1.025 g	87.61
3.	1.031 g	87.68
MW		87.66

- Einstellungen: Standardtrocknung 140°C/ AUTO 0.05 %( $\Delta M$ )

	Probengewicht (g)	Trocknungszeit (min)	Feuchtigkeit (%)
1.	1.036 g	7:10	87.47
2.	1.168 g	8:01	87.52
MW			87.50

Probe vor der Messung



1 g Milch gleichmäßig über einen Glasfaserfilter verteilt

Probe nach der Messung



Nach Entzug der Feuchtigkeit verbleibt ein dünner, gelber Fettfleck



Die Messungen wurden einmal zeitgesteuert (TIME) und einmal automatisch (AUTO) beendet. Beide Abschaltkriterien zeigen ungefähr die gleichen Ergebnisse bei Proben, die viel Wasser enthalten und deren Hauptbestandteile einen relativ hohen Siedepunkt haben.

### 3.1.3 Kristallzucker

Einstellungen: Standardtrocknung 160°C/ TIME 5 min

	Probengewicht (g)	Feuchtigkeit (%)
1.	5.003 g	0.14
2.	5.007 g	0.12
3.	5.043 g	0.14
MW		0.13

Probe vor der Messung



Gleichmäßig auf der Schale verteilt

Probe nach der Messung



Keine Verfärbung, aber Oberfläche leicht verfestigt.

⚠ Bei hoher Trocknungstemperatur kann der Kristallzucker karamelisieren (siehe nachstehenden Foto), eine genaue Messung wird dadurch verhindert.



### 3.1.4 Mayonnaise

**i**

Für pastöse Proben wie Mayonnaise empfiehlt es sich einen Glasfaserfilter (Option) zu verwenden. Dadurch wird die Trocknungszeit reduziert und die Reproduzierbarkeit erhöht.

- Einstellungen: Standardtrocknung 160°C/ TIME 10 min

	Probengewicht (g)	Feuchtigkeit (%)
1.	1.078 g	20.52
2.	0.964 g	20.71
3.	1.097 g	20.60
MW		20.61

- Einstellungen: Standardtrocknung 160°C/ AUTO 0.05 %( $\Delta M$ )


	Probengewicht (g)	Trocknungszeit (min)	Feuchtigkeit (%)
1.	0.952 g	6:38	20.38
2.	1.319 g	6:21	20.42
MW			20.40

Probe vor der Messung



Probe mit einem Spachtel gleichmäßig auf einem Glasfaserfilter verteilt

Probe nach der Messung

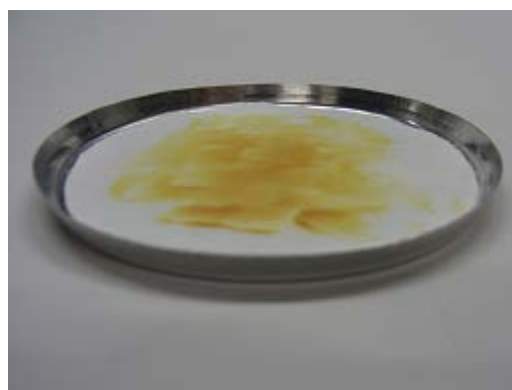

Wasser und Öle verdampfen, leichte Verfärbung

**i**

Die Messungen wurden einmal zeitgesteuert (TIME) und einmal automatisch (AUTO) beendet. Beide Abschaltkriterien zeigen ungefähr die gleichen Ergebnisse bei Proben, die viel Wasser enthalten und deren Hauptbestandteile einen relativ hohen Siedepunkt haben.

### 3.1.5 Löslicher Kaffee

**i** Für dunkelfarbige Proben Trocknungstemperatur so niedrig wie möglich einstellen.

- Einstellungen: Standardtrocknung 120°C/ TIME 10 min

	Probengewicht (g)	Feuchtigkeit (%)
1.	0.994 g	7.33
2.	1.079 g	7.50
3.	0.980 g	7.45
MW		7.43

- Einstellungen: Standardtrocknung 120°C/ AUTO 0.05 %( $\Delta M$ )

	Probengewicht (g)	Trocknungszeit (min)	Feuchtigkeit (%)
1.	1.033 g	7:42	6.97
2.	0.749 g	7:06	7.06
MW			7.02

Probe vor der Messung



Probe nach der Messung



Gleichmäßig auf der Schale verteilt

Fast keine Verfärbung

**i** Die Messungen wurden einmal zeitgesteuert (TIME) und einmal automatisch (AUTO) beendet. Beide Abschaltkriterien zeigen ungefähr die gleichen Ergebnisse.

**⚠** Wenn für dunkelfarbige Proben eine hohe Trocknungstemperatur (z.B. 200 C) eingestellt wird, kann ein Verkohlen (Zersetzen) der Probe vorkommen (siehe nachstehenden Foto), wodurch eine genaue Messung verhindert wird



### 3.1.6 Kaffeebohnen

Die rohen (ungerösteten) Kaffeebohnen waren aufgrund ihres Feuchtigkeitsgehalts klebrig und schwierig in der Kaffeemühle zu mahlen. Beim Verteilen in der Probenschale bildeten sich 2-5 mm große Klumpen.

Die gerösteten Kaffeebohnen waren wie üblich fein gemahlen (einheitliche Partikelgröße). Ungefähr 17 Minuten dauerte es um den ungerösteten Kaffee zu trocknen, was auf die Schwierigkeiten beim Trocknen der Klumpen zurückzuführen ist.

Die Trocknungszeit beim gerösteten Kaffee war aufgrund der feinen Partikel kürzer.

- **Ungeröstete Kaffeebohnen**

Einstellungen: Standardtrocknung 140°C/ AUTO 0.05 %( $\Delta M$ )

	Probengewicht (g)	Trocknungszeit (min)	Feuchtigkeit (%)
1.	5.162 g	17:00	9.40
2.	5.140 g	16:34	9.42
3.	5.021 g	17:35	9.14
MW			9.32

- **Geröstete Kaffeebohnen**

Einstellungen: Standardtrocknung 140°C/ AUTO 0.05 %( $\Delta M$ )

	Probengewicht (g)	Trocknungszeit (min)	Feuchtigkeit (%)
1.	3.028 g	5:57	2.58
2.	3.020 g	7:10	2.68
	3.057 g	8:10	2.78
MW			2.68

Probe vor der Messung



Gleichmäßig auf der Schale verteilt, einige Klumpen der rohen Bohne sichtbar.

Probe nach der Messung



Oberfläche teilweise verbrannt, trotzdem wurde eine gute Wiederholbarkeit erreicht.

### 3.1.7 Grüner Tee

Einstellungen: Standardtrocknung 120°C/ AUTO 0.05 %( $\Delta M$ )

	Probengewicht (g)	Trocknungszeit (min)	Feuchtigkeit (%)
1.	5.056 g	9:15	3.76
2.	5.099 g	9:00	3.75
3.	5.022 g	9:00	3.78
MW			3.76

Probe vor der Messung



Gleichmäßig auf der Schale verteilt

Probe nach der Messung



Fast keine Änderung, nur die glänzend grüne Farbe erscheint gedämpfter.

### 3.1.8 Gersteflocken

Einstellungen: Standardtrocknung 200°C/ AUTO 0.05 %( $\Delta M$ )

	Probengewicht (g)	Trocknungszeit (min)	Feuchtigkeit (%)
1.	5.758 g	9:50	12.64
2.	5.748 g	10:27	12.67
3.	5.710 g	9:58	12.64
MW			12.65

Probe vor der Messung



Gleichmäßig auf der Schale verteilt

Probe nach der Messung



Fast keine Änderung, nur leichte Gelbfärbung

### 3.1.9 Reis

Einstellungen: Standardtrocknung 200°C/ AUTO 0.05 %( $\Delta M$ )

	Probengewicht (g)	Trocknungszeit (min)	Feuchtigkeit (%)
1.	5.938 g	14:19	14.55
2.	5.942 g	13:40	14.47
3.	5.979 g	13:45	14.43
MW			14.48

Probe vor der Messung



Gleichmäßig auf der Schale verteilt

Probe nach der Messung



Gelbfärbung

### 3.1.10 Tomaten Ketchup

**i** Für pastöse Proben wie Ketchup empfiehlt es sich einen Glasfaserfilter (Option) zu verwenden. Dadurch wird die Trocknungszeit reduziert und die Reproduzierbarkeit erhöht.

Einstellungen: Standardtrocknung 140°C/ AUTO 0.1 %( $\Delta$ M)

	Probengewicht (g)	Trocknungszeit (min)	Feuchtigkeit (%)
1.	2.544 g	19:50	69.32
2.	2.450 g	19:30	69.36
3.	2.619 g	20:00	69.53
MW			69.40

Probe vor der Messung



Gleichmäßig auf einem Glasfaserfilter verteilt

Probe nach der Messung



Dunkel verfärbt

### 3.1.11 Zitroneneis

**i** Für pastöse Proben wie Eis empfiehlt es sich einen Glasfaserfilter (Option) zu verwenden. Dadurch wird die Trocknungszeit reduziert und die Reproduzierbarkeit erhöht.

Einstellungen: Standardtrocknung 140°C/ TIME 12 min

	Probengewicht (g)	Feuchtigkeit (%)
1.	2.544 g	84.47
2.	2.450 g	84.73
3.	2.619 g	84.38
MW		84.53

Probe vor der Messung



Bei Raumtemperatur gleichmäßig auf einem Glasfaserfilter verteilt

Probe nach der Messung



Gelbfärbung

### 3.1.12 Getrockneter Mango

Einstellungen: Standardtrocknung 120°C/ TIME 30 min

	Probengewicht (g)	Feuchtigkeit (%)
1.	3.301 g	8.79
2.	3.748 g	9.04
3.	4.474 g	8.38
MW		8.74

Probe vor der Messung



2-3mm große Würfel gleichmäßig auf auf der Schale verteilt

Probe nach der Messung



Braunfärbung, äußere Schicht hart, innerer Kern blieb weich.

Bei einer Messung 12 Std. bei 120°C wurde ein Feuchtegehalt von 23.88 % gemessen. Die Probe war nach der Messung verkohlt, was wahrscheinlich auf den Zuckergehalt zurück zuführen ist.



### 3.1.13 Maisstärke

Einstellungen: Standardtrocknung 180°C/ AUTO 0.02 %( $\Delta M$ )

	Probengewicht (g)	Trocknungszeit (min)	Feuchtigkeit (%)
1.	5.133 g	9:49	12.27
2.	4.910 g	9:14	12.10
3.	5.097 g	9:12	12.14
MW			12.17

Probe vor der Messung



Gleichmäßig auf der Schale verteilt

Probe nach der Messung



Fast keine Veränderung

### 3.1.14 Palmöl

**i** Für pastöse Proben wie Palmöl empfiehlt es sich einen Glasfaserfilter (Option) zu verwenden. Dadurch wird die Trocknungszeit reduziert und die Reproduzierbarkeit erhöht.

Einstellungen: Standardtrocknung 120°C/ TIME 5 min

	Probengewicht (g)	Feuchtigkeit (%)
1.	2.504 g	0.40
2.	2.660 g	0.41
3.	2.537 g	0.43
MW		0.41

Probe vor der Messung



Gleichmäßig auf einem Glasfaserfilter verteilt

Probe nach der Messung



Fast keine Veränderung, hat sich vollständig verteilt

## 3.2 Industrieprodukte, Kunststoffe, Schlamm usw.

### 3.2.1 Natriumtartrat-Dihydrat

Natriumtartrat-Dihydrat ( $\text{NaOOCCH}(\text{OH})\text{CH}(\text{OH})\text{COONa}\cdot 2\text{H}_2\text{O}$ ) ist eine stabile, ungiftige Substanz. Aufgrund ihrer relativ guten Übereinstimmung mit dem theoretischen Feuchtigkeitswert, der sich aus ihrer Molekularformel  $[36.03 \text{ (zwei Wasser Moleküle)} / 230.08 \text{ (gesamtes Molekulargewicht)} = 15,66 \text{ \%}]$  errechnen lässt, wird sie allgemein als Testsubstanz für Feuchtebestimmer verwendet,

Der gemessene Feuchtigkeitsgehalt von 15,80 % weicht leicht vom theoretischen Wert (15,66 %) ab. Die Ursache hierfür ist z. B. die Absorption von Luftfeuchtigkeit während der Lagerung.

Die ca. 0,9% Abweichung zum theoretischen Wert liegt unterhalb der Messfehlergrenze von 1 %.

Einstellungen: Standardtrocknung 160°C/ TIME 15 min

	Probengewicht (g)	Feuchtigkeit (%)
1.	5.103 g	15.79
2.	5.064 g	15.80
3.	5.021 g	15.80
MW		15.80

Probe vor der Messung



Gleichmäßig auf der Schale verteilt

Probe nach der Messung



Fast keine Änderung

### 3.2.2 Plastikgranulat

Kunststoffgranulat enthält neben dem Polymermaterial, auch weitere flüchtige Bestandteile die beim Trocknen entweichen. Da die Feuchtigkeit an der Oberfläche des Granulats gemessen werden sollte, wurde die Trocknungstemperatur auf 100°C eingestellt.

Durch die geringe Trocknungstemperatur gestaltete sich die Trocknung schwierig. Im Trocknungsmodus TIME nimmt der Feuchtigkeitsgehalt mit der Zeit offenbar zu, was auf nachfolgende Verdampfung aus dem Inneren des Granulats zurückzuführen ist.

Im Trocknungsmodus AUTO wird die Messzeit reduziert.

Entweichen bei einem Trocknungsprozess neben Feuchtigkeit auch weitere Bestandteile ist für die Messung des absoluten Feuchtegehalts der Halogen-Feuchtebestimmer ungeeignet.

- Einstellungen: Standardtrocknung 100°C/ TIME 25 min

	Probengewicht (g)	Feuchtigkeit (%)
1.	10.080 g	0.12
2.	10.016 g	0.13
3.	10.290 g	0.13
MW		0.13

- Einstellungen: Standardtrocknung 100°C/ AUTO 0.05 %( $\Delta M$ )

	Probengewicht (g)	Trocknungszeit (min)	Feuchtigkeit (%)
1.	10.67 g	1:59	0.07
2.	10.56 g	1:59	0.07
MW			0.07

Probe vor der Messung



Gleichmäßig auf der Schale verteilt

Probe nach der Messung



Fast keine Veränderung.

### 3.2.3 Waschpulver

Die Messungen wurden mit handelsüblichem Waschpulver durchgeführt, das blaue Teilchen eines Bleichmittels enthält.

Die Trocknungstemperatur wurde auf geringe 120°C gesetzt, damit das Erscheinungsbild der Probe nach dem Trocknen virtuell gleich bleibt.

Die Verdampfung dauerte nach der vergleichsweise langen Trocknungszeit von 13 Minuten weiter an. Angeblich verdampfen Feuchtigkeit oder ein flüchtiger Bestandteil aus dem Inneren der Reinigungspartikel, aber es ist unklar, welcher Bestandteil verdunstet ist.

Die Abschaltbedingung ist 0,05 %. Wird diese Einstellung reduziert, verlängert sich die Messzeit.

Eine Erhöhung der Trocknungstemperatur hat wahrscheinlich eine Zersetzung der Probe zur Folge. Proben, die eine solche graduelle Verdampfung aufweisen, sind schwer zu messen, da das Verhältnis zwischen der Trocknungszeit und der Probenzersetzung bei der Wahl der Messbedingungen berücksichtigt werden muss.

Einstellungen: Standardtrocknung 10°C/ AUTO 0.05 %( $\Delta M$ )

	Probengewicht (g)	Trocknungszeit (min)	Feuchtigkeit (%)
1.	5.086 g	13:15	9.58
2.	5.035 g	12:50	9.75
3.	5.043 g	13:20	9.89
MW			9.79

Probe vor der Messung



Gleichmäßig auf der Schale verteilt

Probe nach der Messung



Fast keine Veränderung

### 3.2.4 Farbe auf Wasserbasis

Die Farbe enthält außer Wasser viele flüchtige Bestandteile, daher dauerte das Trocknen sehr lange. Auch bei einer Trocknungstemperatur von 200°C wurde die Trocknung nicht vollständig beendet.

Da der Feuchtigkeitsgehalt über 50 % liegt, werden sich die Messwerte nicht groß ändern, wenn die Abschaltbedingung verändert wird.

Einstellungen: Standardtrocknung 160°C/ AUTO 0.05 %( $\Delta M$ )

	Probengewicht (g)	Trocknungszeit (min)	Feuchtigkeit (%)
1.	1.113 g	8:53	52.83
2.	1.171 g	10:12	52.09
3.	1.025 g	9:15	52.24
MW			52.39

Probe vor der Messung



Gleichmäßig auf der Schale verteilt

Probe nach der Messung



Fast keine Veränderung

### 3.2.5 Schlammkuchen

Schlammkuchen ist der getrocknete Rückstand von Kläranlagen, danach wird er verascht. Die Messung des Feuchtigkeitsgehalts ist wichtig, da ein hoher Wassergehalt zusätzliche Energie beim Verbrennen benötigt.

Eine Schlammkuchenprobe, die Feuchtigkeit und Fasern enthält, wurde auf die Probenschale gelegt und in etwa 10 mm große Stücke zerbröckelt. Aufgrund des schlechten Geruchs wurde zum Zerbröckeln der Probe nicht allzu viel Zeit aufgewendet.

Die Ergebnisse zeigten 81 % Feuchtigkeitsgehalt und ergaben eine gute Wiederholbarkeit. Die gute Wiederholbarkeit wurde wahrscheinlich dadurch erreicht, dass die Probe außer Wasser wenig flüchtige Bestandteile enthält.

Einstellungen: Standardtrocknung 200°C/ AUTO 0.05 %( $\Delta M$ )

	Probengewicht (g)	Trocknungszeit (min)	Feuchtigkeit (%)
1.	2.170 g	21:03	81.84
2.	2.074 g	21:34	81.20
3.	2.231 g	21:57	81.62
MW			81.55

Probe vor der Messung



Zerbröckelte Probe auf der Schale verteilt

Probe nach der Messung



Volumen aufgrund der Trocknung reduziert

### 3.2.6 Blumenerde

Blumenerde enthält z.B. Kompost, Hühnermist und Erde. Diese Probe enthielt ebenfalls Holzsplitter, die vielleicht zu einer geringfügig erhöhten Wiederholbarkeit des Feuchtigkeitsgehalts beigetragen haben. Aufgrund der niedrigen Trocknungstemperatur von 120°C war fast keine Änderung des Erscheinungsbilds nach dem Trocknen festzustellen.

Einstellungen: Standardtrocknung 120°C/ AUTO 0.05 %( $\Delta M$ )

	Probengewicht (g)	Trocknungszeit (min)	Feuchtigkeit (%)
1.	4.973 g	15:40	33.62
2.	5.065 g	15:50	33.98
3.	5.032 g	15:00	33.59
MW			33.40

Probe vor der Messung



Gleichmäßig auf der Schale verteilt

Probe nach der Messung



Fast keine Veränderung

### 3.2.7 Sägemehl

Die Trocknungstemperatur wurde auf 160°C, eingestellt, da solche Proben sich bei Trocknungstemperaturen von 200°C entzünden können. 4 g Sägemehl wurde gleichmäßig in etwas dickerer Schicht auf der Schale verteilt.

Trotz der dicken Schicht wurde eine wirksame Verdampfung aufgrund der großen Anzahl von Zwischenräumen erreicht. Dadurch ergaben sich kurze Trocknungszeiten und eine gute Wiederholbarkeit.

Einstellungen: Standardtrocknung 160°C/ AUTO 0.02 %( $\Delta M$ )

	Probengewicht (g)	Trocknungszeit (min)	Feuchtigkeit (%)
1.	4.176 g	8:50	34.05
2.	4.032 g	8:30	34.67
3.	4.054 g	8:00	34.41
MW			34.38

Probe vor der Messung



Gleichmäßig auf einer Schale mit einer Schicht von ca. 4mm verteilt

Probe nach der Messung



Oberfläche leicht verbrannt, bräunliche Farbe, trotzdem gute Wiederholbarkeit

### 3.2.8 Toner

Einstellungen: Schon Trocknung 100°C/ TIME 2 min

	Probengewicht (g)	Feuchtigkeit (%)	Trocknungszeit (Aufheizzeit 5min + 2 min bei 100°C)
1.	3.100 g	0.77	7:00
2.	3.102 g	0.71	7:00
3.	3.051 g	0.66	7:00
MW		0.71	

Probe vor der Messung



Gleichmäßig auf der Schale verteilt

Probe nach der Messung



Geschmolzen mit verkrusteter Oberfläche

### 3.2.9 Lippenstift

Lippenstift enthält neben Wasser flüchtige Bestandteile wie Alkohole. Die Probe schmilzt beim Erhitzen, nach dem Abkühlen auf Raumtemperatur bleiben jedoch die ursprüngliche Viskosität und Textur erhalten.

Einstellungen: Standardtrocknung 100°C/ TIME 3 min

	Probengewicht (g)	Feuchtigkeit (%)
1.	0.666 g	0.75
2.	0.768 g	0.78
3.	0.923 g	0.65
MW		0.73

Probe vor der Messung



3mm große Stücke auf der Schale verteilt

Probe nach der Messung



Der Lippenstift war nach 1 min geschmolzen.

### 3.2.10 Handseife

Einstellungen: Standardtrocknung 200°C/ TIME 16 min

	Probengewicht (g)	Feuchtigkeit (%)
1.	2.373 g	9.14
2.	2.683 g	9.21
3.	2.712 g	8.92
MW		9.09

Probe vor der Messung



Späne gleichmäßig auf der Schale verteilt

Probe nach der Messung



Braunfärbung und kleine Bläschen an der Oberfläche

## 4 Anhang

### 4.1 Applikationstabelle

Material	Gewicht Probe (g)	Trocknungs-temperatur (°C)	Trocknungs-zeit (ca.) (min)	Feuchtig-keit % (ca.)	Fest-körper % (ca.)
ABS (Novodur P2H-AT)	10	60	10	0,11	
Akkumulatorenblei	10	110	2,6	0,19	
Acrylgranulat	10-15	80	12	0,18	
Aktivkohle	10	80	9,8	13,33	
Aktivkohle	7,6	80	4,1	6,12	
Ananas, Stücke	5	110	14,4	6,71	
Apfelstück (trocken)	5-8	100	10-15	76,5	
Apfelstück (feucht)	5-8	100	5-10	7,5	
Artesan-Pulver	0,5	80	3,5		98,44
Aspartam-Granulat	0,5	105	3,4		96,84
Bademilch	3	80	27,4	83,87	
Baumwollsamensamen	3-4	110	6,3	6,8	
Blaukäse	2	160	13,3		53,06
Blumenerde	5	120	15,3	33,4	
Bodylotion	3	80	31,6	87,76	
Bohnen	4,5	150	9,7	11,85	
Butter	1,7	140	4,3		84,95
Celluloseacetat	5,5-6	50	1,3	0,81	
Chines. Potenzpulver	2,5-3	110	5,5	6,24	
CN Fotopapier	2	150	6,4	5,81	
Cornflakes	2-4	120	5-7	9,7	
Dachziegelmasse	2,5	160	10		81,74
Dachziegelmasse	7	160	20		81,74
Dialysemembran (Polyethes – Polycarbonat)	0,5	80	2,2	7,85	
Dialysemembran (Polyethes – Polycarbonat)	0,5-0,7	80	2,0	7,86	
Dichtungsmasse für Innenräume	3	160	7		64,04

Material	Gewicht Probe (g)	Trocknungstemperatur (°C)	Trocknungszeit (ca.) (min)	Feuchtigkeit % (ca.)	Festkörper % (ca.)
Dispersionsklebstoff	1,5	140	9,5		55,69
Dispersionsklebstoff (wässrig)	2,5	155	7,2	43,77	
Dolomit	10-12	160	6,1	0,06	
Druckerfarbenflüssigkeit	1,5	120	10		19,15
E-Filterstaub aus einer Müllverbrennung	7-10	135	7	26,23	
Erbsen, „dänische, gelbe“	3,5	135	7,9	15,19	
Erdnußkerne	2,8	100	4	1,97	
Erdnußkerne	3	100	6	3,2	
Erfrischungsbonbons	3-3,4	90	2,9	0,29	
Farbe auf Wasserbasis	1	200	9,27	52,39	
Farbpulver	1,5	120	3,5		99,07
Feinkeramikmasse	2,5	160	9		86,89
Filmabfälle	8-9	60	1,2	0,4	
Flußwasser	4	160	20	99,2	
Fondant/Zuckermasse	5	130	20	8	
Formaldehydharnstoffdispersion	2	155	7,6	34,07	
Frischkäse	1,4	70	15		41,03
Futterpellets	3-4	150	5,7	6,35	
Getrocknete Bohnen	3-4	105	5	7,3	
Getrocknete Erbsen	5-7	110	9,6	5,89	
Getrocknete Karotten	5,5-6	120	3	4,92	
Getrockneter Hühnerdung	4	140	8	14,81	
Getrockneter Mais	5-7	110	10	6,21	
Glaspulver	8-10	160	5	0,26	
Haarfestiger	0,01	145	9	98,76	
Haarfestiger (extra stark)	1	130	8	97,85	
Haargel	5	105	37,0	94,71	
Haferflocken	2	105	5,6	9,35	
Haselnußkerne	2,2	100	3,8	4	
Haselnußkerne (geschält)	2,6	100	4,5	3,74	
Hundefutter	1	160	5,5	6,45	
Hydranal Natriumtatrat – 2 – hydrat	5	160	15	15,80	

Material	Gewicht Probe (g)	Trocknungstemperatur (°C)	Trocknungszeit (ca.) (min)	Feuchtigkeit % (ca.)	Festkörper % (ca.)
Joghurt	2-3	110	4,5-6,5	86,5	
Kaffee, instant	1	120	10	7043	
Kaffeebohnen roh	5	140	17,3	9,32	
Kaffeebohnen geröstet	3	140	7	2,68	
Kaffeesahne	2-3	130	6-8	78,5	
Kaffeesamen	3,5-4	120	8	8,53	
Kakao	2,5	105	4	3,45	
Kakaobohnen	4-5	130	7,8	6,23	
Kalkstein	12-14	160	5	0,05	
Kartoffelpulver	2,5-3,0	130	5,8	12,46	
Kartoffelchips	3-4	106	7,5	6,9	
Ketchup	2	120	18	74,44	
Kieselgel	9,5	115	4,5	0,63	
Klebstoff	2-5	136	6-8	54,3	
Knoblauch, Pulver	2	100	7,3	5,36	
Kohlepulver	4	160	3,4	2,11	
Kreide (natur)	8	160	1,7	0,06	
Kristallzucker	5	160	1	0,13	
Kunstharzdispersion (wässrig)	2	160	5,9	60,21	
Latex	1-2	160	5,2	38,64	
Latex LE1	3-5	125	10,8	46,58	
Latex LE2	3-5	125	9,4	50,37	
Latex O44	3-5	125	9,4	50,65	
Linsen	4	135	5,4	12,49	
Lössboden	10-15	160	5,5	9,89	
Lösslehm	2,5	160	14,5		80,75
Magermilchpulver	4	90	5,5	3,67	
Magerquark	1,2	130	8		18,5
Maisstärke	5	200	7,5	12,94	
Mandeln (karamellisiert)	3,5	80	4,8	1,81	
Mandeln (naturbelassen)	2,5	100	5,3	4,19	
Mandeln „kalifornische“	3	100	5,3	4,34	

Material	Gewicht Probe (g)	Trocknungs-temperatur (°C)	Trocknungs-zeit (ca.) (min)	Feuchtig-keit % (ca.)	Fest-körper % (ca.)
Margarine	2,2	160	4	19,15	
Mauerziegelmasse	7	160	20		80,13
Mayonnaise	1	160	10	20,6	
Mehl	8-10	130	4,5	12,5	
Micronyl	7-8	60	8	0,4	
Milch	1	140	7,3	88	
Milchpulver (MMP)	4,5	100	6,3	2,46	
Milchpulver (VMP)	4,5	100	5,5	2,56	
Mozzarella	1,5	160	11,1		45,78
Multivitaminbonbons	3-3,4	115	3,3	0,4	
Naturlatex	1,4	160	5,3	42,56	
Nougatmasse	2,5	103	10	0,6	
Nudelteig	0,55	160	5	12	
Orangensaft	1	140	10	88,89	
Papier	1	106	10	6,4	
PA 6 (Ultramid B3WG5)	10	60	10	0,05	
PA 6,6 (Ultramid A3WG7)	10	80	10	0,15	
PBTP (Crastin SK645FR)	10	80	10	0,05	
PC (Macrolon 2805)	10-12	80	15	0,08	
PC/ABS (Babyblend T65MN)	9-11	80	10	0,12	
Pfeffer, schwarz, Pulver	2	85	8,8	7,97	
Plastikgranulat (PMMA)	10	100	25	0,13	
PMMA (Plexiglas 6N)	10	70	10	0,12	
Polypropylen	13	130	9	0,23	
Polypropylen	3,3	120	2,2	0,09	
Polystyrolsulfonsäure Natriumsalz Lsg.	2-2,5	120	8,7	19,01	
POM (Hostaform C9021))	10	80	10	0,13	
PS (Polystyrol 168 N)	10	80	10	0,05	
Purin	2	105	3,8	8,64	
Quark	1	140	7		18
Quark, „Fettquark“	1,2	130	8		23
Quarzsand	10-14	160	1,9	0,24	

Material	Gewicht Probe (g)	Trocknungs-temperatur (°C)	Trocknungs-zeit (ca.) (min)	Feuchtig-keit % (ca.)	Fest-körper % (ca.)
Raclette-Käse	1,5	160	14,4		56,9
Rapssamen	3-4	90	7,4	6,18	
Reis weiß	5	200	12,3	15,12	
Roggen	4,5	150	11,5	10,72	
Rotwein	3-5	100	15-20	97,4	
Rübenschnitzpellets	4,5	150	8,6	11,77	
Sägemehl	4	160	8,3	34,4	
Salz	5	200	10	0,08	
Salzstangen	3-4	75	4,5	1,67	
Schlamm	2	200	21	81,55	
Schmelzkäse	1,5	70	15	35,65	
Schokolade	3	140	6	2,4	
Schokoladenpulver	2-4	100	4	1,9	
Schokoladenwasser	2-3	90	10		6
Schweinefutter aus Küchen-abfällen	4-5	160	21		17,67
Schweineschmalz	0,70	160	3,5	1,2	
Shampoo	2	100	21,4	88,9	
Seife (Handseife)	1	200	6	7,86	
Senf	2,5-3	80	19		34,69
Sesamsamen	3	130	8	5,48	
Sojamehl	4,6	95	4,9	4,8	
Sojabohnen, Granulat	5	110	22,6	12,16	
Sonnenblumenkernschrot	3-3,5	100	4	5,92	
Sonnenblumenöl	10-14	138	2	0,1	
Spaghetti	3	105	15,1	10,63	
Spülmittel	2	80	13,7	59,64	
Staub	5-10	104	8-15	7,3	
Stärkederivat	2,5	150	12,3		30,29
Stärkekleber	1,5	100	8,9		17,96
Streichkäse	2,5-2,8	160	4,5		36,81
Suppe (Fertigprodukt)	2-3	80	4,5-7	3	

Material	Gewicht Probe (g)	Trocknungs-temperatur (°C)	Trocknungs-zeit (ca.) (min)	Feuchtig-keit % (ca.)	Fest-körper % (ca.)
Tabak	1,5	100	16	10,18	
Tee, schwarz	2	105	4	7,67	
Tee, grün	5	120	9	3,76	
Teigwaren	1,5	120	8	10,64	
Textiler Faserstoff	0,8-1,2	85	3,6	14,03	
Theophyllin	1,5	130	1,9	7,33	
Thermoplastisches PUR – Granulat	15-18	80	18	0,08	
Walnuß	2,8	100	5,6	3,5	
Waschpulver	5	160	13	9,79	
Weizenquellwasser	2-3	90	10		6
Wurstpelle	0,2	150	3,5		78,56
Zahnpasta	2	100	7,7	34,28	
Zellstoff	2,5	130	4,5	7,32	
Zement	8-12	138	4-5	0,8	
Zucker	4-5	138	10	11,9	
Zuckerrüben	2	130	13,4		30,94